



 **OxyLife**  
Sống khỏe từ gốc

“Mang Không Khí Của  
Rừng Và Biển Về Nhà”

## Máy Tạo Oxy Tinh Khiết G9



[oxylife.vn](http://oxylife.vn)




## Tác Dụng Của Oxy

# 1% Oxy Giúp Bảo Vệ Và Nâng Tầm Chất Lượng Cuộc Sống

Trước

19,8%

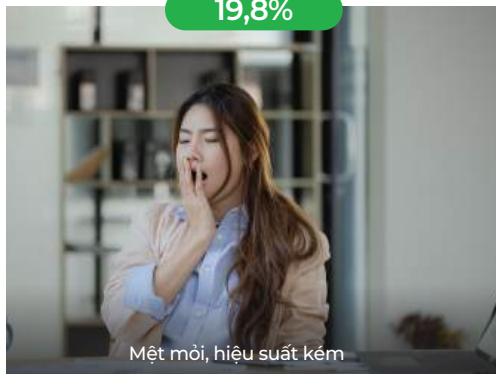


Mệt mỏi, hiệu suất kém

Sau

21,5%



Tập trung, tỉnh táo

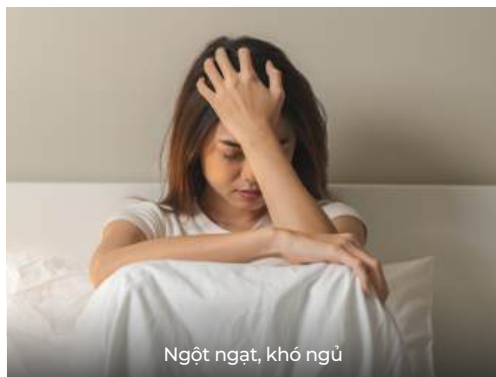

Ngọt ngào, khó ngủ



Ngủ ngon, sâu giấc



# Tác Dụng Của Oxy



**\*Tăng Cường Hoạt Động Não Bộ:**  
Cải thiện sự tập trung, suy nghĩ và trí nhớ, tăng tính táo, tăng hiệu suất làm việc.



**Tăng Cường Miễn Dịch:**  
Tăng cường sức đề kháng của cơ thể với vi khuẩn và virus.



**Phục Hồi Sức Khỏe:**  
Thúc đẩy quá trình phân hủy acetaldehyde giảm mệt mỏi.



**Thúc Đẩy Hấp Thu Chất Dinh Dưỡng:**  
Tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất...



**Lợi Ích Ưu Việt Cho Da:**  
Làn da khỏe mạnh, thêm sức sống...



**Cải Thiện Trao Đổi Chất:**  
Hỗ trợ bài tiết và tăng cường trao đổi chất, tập luyện với oxy nồng độ cao giúp đốt mỡ tốt hơn.



**Phục Hồi Chức Năng Vật Lý:**  
Tăng khả năng phân hủy axit lactic ở các mô cơ trong quá trình tập luyện, cải thiện sức bền tuyệt vời.


*\*Nguồn tham khảo: National Library of Medicine. PMC4827624. Tác giả: Addict Behav.*

## Sự Chênh Lệch Nồng Độ Oxy Tại Các Địa Điểm

Vị trí	Phòng xông hơi	Tầng hầm	Trung tâm thành phố	Ngoại ô thành phố	Không khí bình thường	Công viên nhiều cây xanh	Rừng nguyên sinh
Nồng độ oxy	18 - 19.3%	<20.4%	20.5 - 20.7%	20.8 - 20.9%	20.99%	21.2%	21.3%
Cảm giác	Khó chịu, ngột ngạt	Khó chịu, đau đầu	Hơi khó chịu	Bình thường	Sảng khoái		Rất sảng khoái



## Sản Phẩm G9

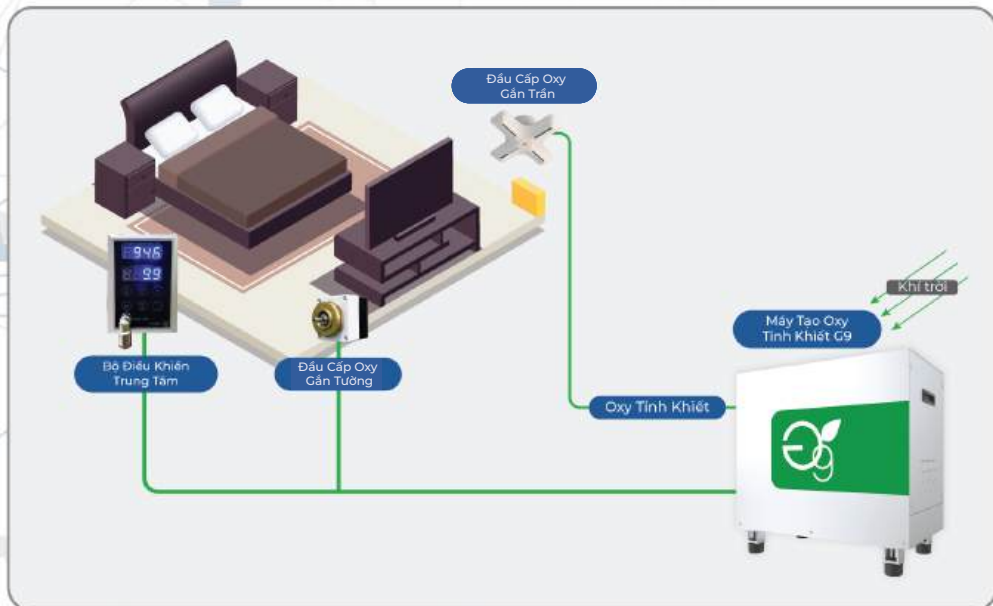

## Thông Số Sản Phẩm



Máy Tạo Oxy Tinh Khiết G9

Dòng oxy	10L/phút
Nồng độ	Lên đến 96%
Độ ồn	≤ 53dB(A)
Điện áp	220 VAC 50Hz
Công suất tiêu thụ	~700W
Kích thước	753,5 x 412 x 697mm
Trọng lượng	70Kg

### Bộ Điều Khiển Trung Tâm



Hiển thị	Led
Thông số	Nồng độ oxy, dòng oxy
Chức năng	Tắt / Bật Hẹn giờ Chế độ tiết kiệm điện

### Đầu Cấp Oxy



Kích thước	Đường kính : 130 mm Độ dày : 18.3 - 29.5 mm
------------	--

## Giải Pháp

Máy tạo oxy OxyLife-G9 ứng dụng công nghệ PSA (Pressure Swing Adsorption) tiên tiến để chiết xuất oxy tinh khiết trực tiếp từ không khí xung quanh. Đây là quy trình hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hóa chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng và thân thiện với môi trường.



- Không khí được xử lý qua các bước tinh lọc để loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm và các tạp chất không mong muốn.
- Nhờ vào công nghệ PSA, thiết bị tách riêng oxy khỏi các thành phần khí khác một cách hiệu quả, đảm bảo nồng độ oxy đầu ra vượt ngưỡng 90% - tiêu chuẩn cao trong lĩnh vực y tế.
- Hệ thống van và cảm biến điều khiển thông minh giúp duy trì lưu lượng oxy liên tục, ổn định và phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.

## Những Nơi Cần Lắp Đặt Hệ Thống Tạo Oxy Tinh Khiết



- Phòng ngủ



- Phòng lãnh đạo



- Phòng xông hơi  
- Spa



- Phòng họp



- Văn phòng



- Lớp học  
- Thư viện



- Các CLB sức khỏe  
- Phòng gym



- Phòng chờ thương gia  
- Phòng VIP



## Tính Năng Sản Phẩm

- Chất lượng oxy đạt tiêu chuẩn y tế theo Dược điển Mỹ, Dược điển Châu Âu và TCVN7742.
- Lưu lượng oxy lớn 14m<sup>3</sup>/ngày, đảm bảo nồng độ 93% ±3% tại lưu lượng lớn nhất.
- Thiết kế đặc biệt giảm tiếng ồn xuống dưới 50dBA
- Được nhiệt đới hoá, hoạt động bền bỉ trong môi trường nóng và độ ẩm cao, giúp tuổi thọ cột lọc oxy dài hơn.
- Có tùy chọn chia phòng, cung cấp được oxy cho nhiều phòng, nhiều mục đích sử dụng khác nhau: phòng ngủ, phòng khách, buồng oxy cao áp cá nhân.
- Tính năng kết nối cloud, máy được theo dõi liên tục về chất lượng oxy, tình trạng máy.
- Có API mở, cho phép kết nối với các bộ điều khiển nhà thông minh của bên thứ 3.
- Hệ thống dịch vụ sau bán hàng từ nhà máy tại Việt nam, nhanh và tiết kiệm.

# Các Chứng Chỉ Chất Lượng

## Hình Ảnh Lắp Đặt Thực Tế



## Chứng Chỉ Chất Lượng



ISO 9001:2015

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng



ISO 13485:2016

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực thiết bị y tế



Kiểm định chất lượng Vinacontrol

Kiểm tra chất lượng máy tạo oxy



# “Mang Không Khí Của Rừng Và Biển Về Nhà”



## NOVAMED VIETNAM

 Số 151/75 Trần Quang Diệu, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

 Số điện thoại: 0888 515 175

 Website: [oxylife.vn](http://oxylife.vn)